

**MATERIALE**  
Aluminium med gråfarget gummibelegg som gir stor friksjon.

**VEDLIKEHOLD**  
Vanlige vaskemidler.  
Kan hektes av og på ved renhold.

**SIKKERHET**  
Unngå snø, is og regn.

**MONTERING**  
Ta vekk feielist.  
Monter medfølgende skruer i terskel slik at de passer med slisser i terskeleliminatorens forkant.  
Juster terskeleeliminatorens høyde ved å finne riktig spor i høydejusteringslist.

**NB** Høydejusteringslisten har tre langsgående spor som gir muligheten for seks høydeintervall, tre forskjellige fra hver ende.  
Høyder under 23 mm har ikke høydejusteringslist.  
Høyder over 41 mm har understøttelseslist.

Denne monteres som vist over\* og festes med dobbeltsidig tape.  
**NB** Påse at terskeleeliminatorens hviler mot underlaget slik at den ikke henger på skruene i terskelen.

**MAKS BELASTNING 350 KG**  
**LEVERES I BREDDENE 70, 80 OG 90 CM**

**MATERIAL**  
Aluminium with non-skid, grey rubber-coating.

**MAINTENANCE**  
As the rest of the house.  
The eliminator is easy to remove when cleaning.

**SAFETY**  
Avoid snow, ice and rain.

**INSTALLATION**  
Remove skirting. Fasten the enclosed screws into the threshold. Make sure they fit into the slots in the front edge of the eliminator.  
Adjust the height of the threshold eliminator by finding the correct slot in the height adjustment list.

**NOTE** The height adjustment list has three longitudinal slots allowing for six height intervals, three from each end. Heights under 23 mm have no adjustment list. Heights over 41 mm have a support list.

This is assembled as shown above\* and attached with double-sided tape.  
**NOTE** Make sure the threshold eliminator is not hanging on the screws, but is resting against the floor.

**MAX. LOAD 350 KG**  
**DELIVERED IN WIDTHS 70, 80 AND 90 CM**

**MATERIAL**  
Aluminium mit rutschfestem, graugefärbtem Gummibelag.

**WARTUNG**  
Reinigung mit handelsüblichen Mitteln.  
Für gründliche Reinigung wird der Schwelenausgleicher abgehängt und wieder befestigt.


**SICHERHEIT**  
Sollen nicht bei Schnee und Regen angewendet werden.

**MONTAGE**  
Entfernen Sie die Leiste. Befestigen Sie die beigefügten Schrauben in die Schwelle, so daß diese mit den Schlitten im Schwelenausgleicher übereinstimmen. Wählen Sie die richtige Rille in der Höheneinstellungsleiste.

**Achtung** Die Höheneinstellungsleiste hat drei Rillen die die Möglichkeit für sechs verschiedene Höheneinstellungen bieten. Höhen unter 23 mm haben keine Höheneinstellungsleiste. Höhen über 41 mm haben eine Stützleiste. Diese wird, wie oben gezeigt\*, angebracht und mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

**Achtung** Beachten Sie, dass der Schwelenausgleicher am Boden anliegt und nicht in den Schrauben hängt.

**MAX. BELASTUNG 350 KG**  
**LIEFERUNG IN DEN BREITEN 70, 80 UND 90 CM**

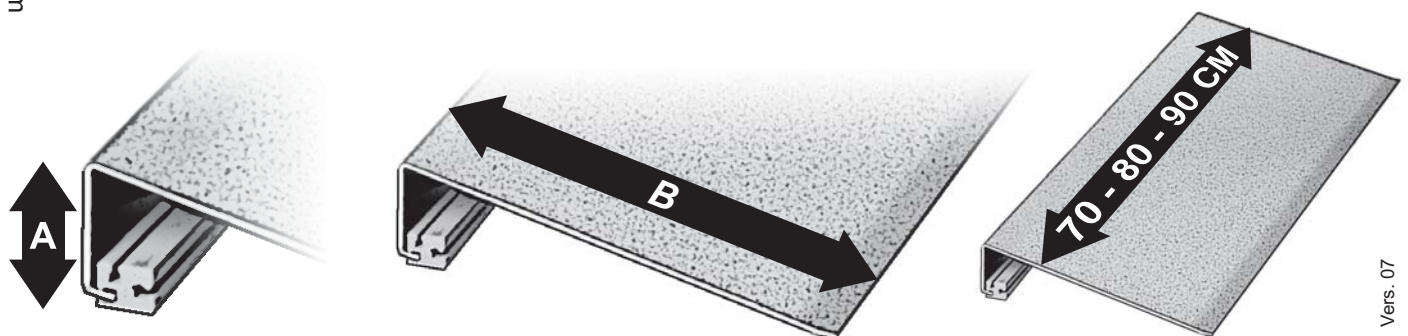

A	B	TOPRO ART. NO			HMS ART. NO.		
		70 CM	80 CM	90 CM	70 CM	80 CM	90 CM
15 mm	116 mm	814525	814526	814527	014187	014186	014185
23 - 38 mm	180 mm	814510	814511	814512	014112	014117	014122
41 - 56 mm	270 mm	814513	814514	814515	014113	014118	014123
59 - 74 mm	340 mm	814516	814517	814518	014114	014119	014124
77 - 92 mm	390 mm	814519	814520	814521	014115	014120	014125
95 -110 mm	420 mm	814522	814523	814524	014116	014121	014126
113 -128 mm	450 mm	814535	814536	814537	143234	143235	143236
131 -146 mm	480 mm	814538	814539	814540	143237	143238	143239
149 -164 mm	510 mm	814541	814542	814543	143240	143241	143242