

# Invacare® | **Matrix® Libra®**

NEU



## Eine neue Generation der Sitzkissen mit idealen Positionierungseigenschaften

- Die Weiterentwicklung von Kissenschaum und medizinischer Fluidauflage sorgen für bestmöglichen Schutz vor Dekubitus, bei gleichzeitig besten Positionierungseigenschaften.
- Die neue, doppellagige Fluidauflage wurde auf Basis der Invacare **Flo-tech™** Technologie entwickelt, für eine verbesserte Scherkräfte- und Druckverteilung.
- Die besondere Kontur optimiert die Körperhaltung, indem sie Balance und Beckenstabilität gibt.
- Dank dieser besonderen Eigenschaften ist das Kissen nicht nur sehr leicht und wartungsfrei, sondern zugleich bestens geeignet für die unterschiedlichen Positionierungsansprüche im alltäglichen Leben unterschiedlicher Nutzer.



**matrix®**  
SEATING SERIES



**Yes, you can.®**



### Einzigartiges Design

- Anatomisch konturierter Kissenschaum - für optimale Beckenunterstützung und Positionierung.
- Sehr widerstandsfähiger und langlebiger Schaum, der mit besonderem Verfahren behandelt ist, für antimikrobiellen Schutz und Verhinderung von Geruchsbildung.
- Medizinisches Fluid - Doppellagige Auflage mit abgetrennten und versiegelten Kammern für ein Maximum an Sicherheit im Bereich der Knochenvorsprünge.

### Vorteile

- Besondere Kissenkontur verhindert ein Herausrutschen.
- Gesäßausparungen im hinteren Kissenbereich unterstützen eine waagerechte Beckenhaltung und geben seitliche Stabilität.
- Die abgeschrägten vorderen Kanten passen sich der Oberschenkelmuskulatur an und fördern den selbständigen Fußantrieb.
- Die abduzierte bzw. adduzierte Konturführung fördert eine parallele Beinhaltung.

### Sehr leicht und langlebig

- Das sich selbst ausgleichende Fluid ist temperaturunabhängig und muss nicht geknetet oder gewartet werden.
- Im Vergleich zu anderen hochwertigen **Flo-tech™** Kissen ist das **Matrx Libra** 40% leichter und damit ideal für einen aktiven Lebensstil.
- Für komplexe Sitzanforderungen ist eine breit gefächerte Auswahl an Positionierungselementen verfügbar, um individuelle Anpassungen vorzunehmen.

## Merkmale und Optionen



**Große Auflagefläche**  
Vergrößerte Oberfläche für ideale Druckverteilung.



**Druckverteilung**  
Die Gewichtsverlagerung vom Gesäß zu den Oberschenkeln reduziert den Druck an gefährdeten Stellen.



**Kontrolliertes Einsinken**  
Vorstehende Knochen sinken in die Fluidauflage ein und sind optimal geschützt.




**Reduzierung der Scherkräfte**  
Das einzigartige Design lässt kontrollierte Bewegungen des Beckens zu.

## Merkmale und Optionen



### Abgeschrägte Kanten

Für verkürzte hintere Oberschenkelmuskulatur, einfachen Transfer und Fußantrieb.

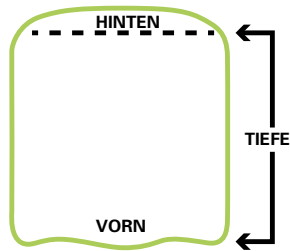

### Kissengröße

Sitztiefe wird anhand der Seitenlänge des Kissens gemessen.



### Hinterer Kissenradius

Eine 3,8 cm starke Umrandung sorgt für maximale Sitzfläche und minimalem Abstand zwischen Sitz und Rücken. Zudem fixiert es das Fluid bei verändertem Sitzwinkel oder Kantelung. Eine extra Aussparung für das Steißbein sorgt für Entlastung.



### Vorderer Keil

Erhöht das Kissen vorn, um ein nach vorne Rutschen zu verhindern und Scherkräfte zu verringern.



### Halbseitiger vorderer Keil

Bei einer eingeschränkten Beweglichkeit der Hüfte oder für eine geringere Sitzhöhe bei Fußantrieb.



### Eckkeil vorne

Für zusätzliche Schenkelunterstützung.



### Eckkeil hinten

Bei Schiefstellungen und Beckenrotation.



### Seitliche Keile

Verbesserte, seitliche Stabilität für eine zentrale Sitzposition.



### Optionale Fluidauflagen

Für den gezielten Schutz oder Anpassung, integriert sich sicher in die eigentliche Auflage und unterstützt das Becken.



### Abduktionskeil

Zur Unterstützung einer korrekten Oberschenkelführung und Hüftposition.



### Seitentasche

Einfach zu öffnen mit einer Schnur.

## Größen

### Standardkissen

**Max. Nutzergewicht: 136 kg**

Angaben jeweils in Breite x Tiefe in mm:

360 x 310	380 x 410	410 x 410	430 x 410	460 x 410	480 x 410	510 x 410
360 x 360	380 x 460	410 x 460	430 x 460	460 x 460	480 x 460	510 x 460
360 x 410	380 x 510	410 x 510	430 x 510	460 x 510	480 x 510	510 x 510

### Heavy Duty-Kissen

**Max. Nutzergewicht: 227 kg**

Angaben jeweils in Breite x Tiefe in mm:

530 x 460	560 x 46
530 x 510	560 x 510
530 x 560	560 x 560

## Technische Daten



**Matrx Libra**

Gesamtgewicht:  
1,6 kg




Max. Nutzergewicht:  
Standard: 136 kg  
Heavy Duty: 227 kg



Reinigung  
Bezug:  
80°



Reinigung  
Innenschäum:  
Oberflächenreinigung  
mit feuchtem Tuch

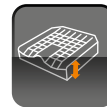

Gesamthöhe:  
890 mm




- 1/ Konform mit den Beschränkungen bei der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten nach RoHS (2011/65/EC)
- 2/ Konform mit der Regulation in Bezug auf Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.

## Bezüge



Atmungsaktiver und  
feuchtigkeitsresistenter  
Bezug

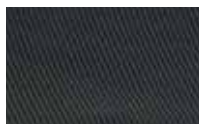

Atmungsaktiver  
Bezug

Invacare GmbH  
Alemannenstraße 10  
88316 Isny / Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
Fax +49 7562 700-66  
E-Mail kontakt@invacare.com  
Web www.invacare.de

© 2015 Invacare International Sàrl.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Änderungen unserer  
Produkte sowie Druckfehler und  
Farbabweichungen behalten wir  
uns vor.

Stand 07/2015 - 1582891



**Yes, you can.®**