

**ENTDECKEN SIE
DIE GEMINO-FAMILIE!**



GEMINO



GEMINO

DIE ROLLATOREN-
FAMILIE

ÜBERSICHT MODELLE:

Gemino 60

Der Robuste



Gemino 30

Der Testsieger



Gemino 30 SpeedControl

Die Innovation



Gemino 30 Walker

Der Unterstützende



Gemino 20

Das Basismodell





GEMINO 60

DER ROBUSTE

Möchten Sie einen Rollator, der sich Ihrer Lebenssituation perfekt anpasst und Sie selbst auf anspruchsvollem Untergrund begleitet? Dann sollten Sie sich für den Gemini 60 mit seinen großen und weichen Rädern entscheiden. Mit ihm brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen, welche Wege Sie nehmen: Sie werden sehen, mit dem Gemini 60 geht alles viel leichter, denn er ermöglicht Ihnen ein aktives Leben!

1 Der extra große Abstand zwischen den Handgriffen bietet Ihnen viel Platz zum Sitzen.

2 Der breite Radstand sorgt für außerordentliche Stabilität und durch die max. Belastbarkeit von 150 kg ist der Rollator auch ideal für schwergewichtige Personen.

3 Das weiche Material der Räder ermöglicht ein besonders ruhiges Laufverhalten, das Sie bei jedem Schritt spüren werden.





Mit dem Gemini 60 können Sie einfach losgehen und das Leben genießen! Durch die großen Vorderräder gibt er Ihnen maximale Sicherheit und kann auf nahezu jedem Untergrund eingesetzt werden. Bodenunebenheiten wie Türschwellen, Bordsteinkanten, Kopfsteinpflaster oder Waldwege lassen sich bequem überfahren.

Der Gemini 60 ist ein praktischer Begleiter im Alltag! Und wenn Sie ihn gerade nicht benötigen, macht er sich ganz schmal. Durch die Kreuzstrebe mit der Doppelverriegelung und die innovative falt-Klick-Technik rastet er beim Zusammenklappen elegant ein, steht in zusammengeklapptem Zustand und kann so platz sparend verstaut werden.

ABMESSUNGEN

| | GEMINO 60 | GEMINO 60 M |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Schiebegriffhöhe vom Boden | 76 - 95 cm | 73 - 83 cm |
| Gesamtlänge | 74 cm | 74 cm |
| Gesamtbreite | 64 cm | 64 cm |
| Breite zwischen den Schiebegriffen | 51 cm | 51 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 53 cm |
| Höhe gefaltet | 84 cm | 80 cm |
| Länge gefaltet | 74 cm | 74 cm |
| Breite gefaltet | 23 cm | 23 cm |
| Wendekreis | 95 cm | 95 cm |
| Vorderräder | 28 x 4,2 cm | 28 x 4,2 cm |
| Hinterräder | 23 x 4,2 cm | 23 x 4,2 cm |
| Gewicht ohne Korb | 8,5 kg | 8,2 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg! | 150 kg! |
| Maximale Belastbarkeit des Korbes | 10 kg | 10 kg |
| Empfohlene Körpergröße des Nutzers | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm |



GEMINO 30

DER TESTSIEGER

Möchten Sie einen ganz ausgezeichneten Rollator, der völlig neue Maßstäbe setzt? Der Ihre Erwartungen in punkto Sicherheit, Qualität, Komfort und Design noch übertrifft? Dann sollten Sie sich für den Gemini 30 entscheiden, denn der Testsieger des Verbrauchermagazins Öko-Test wird Akzente in Ihrem Leben setzen und Ihnen viel Freude bereiten!



reddot design award
best of the best 2011

- 1** Die besonders leichtgängigen Bremsen lassen sich durch die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads selbst mit wenig Restkraft sicher bedienen.
- 2** Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Effekt kann die Handgriffhöhe ganz einfach auf Sie angepasst werden.
- 3** Die rundum integrierten Reflektoren gewährleisten, dass man Sie im Scheinwerferlicht von allen Seiten frühzeitig sehen kann.





Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat im August 2011 insgesamt 10 Rollatoren intensiv geprüft. Neben der Handhabung wurden auch die Stabilität und Sicherheit sowie die Inhaltsstoffe untersucht. Der Gemino 30 war Gesamtsieger im Test und wurde als einziger Rollator in allen drei Prüfkategorien mit SEHR GUT beurteilt!



Es macht Freude, mit dem Gemino 30 unterwegs zu sein! Der stoß- und kratzfest eloxierte Rahmen sorgt dafür, dass er auch künftig in Top-Form bleibt. Bringen Sie Farbe ins Spiel und wählen Sie den Rollator in Ihrer Lieblingsfarbe aus. Je nach Modell ist er in bis zu 6 Farben erhältlich, die Sie auf Seite 14 sehen können.

| ABMESSUNGEN | GEMINO 30 | GEMINO 30 M | GEMINO 30 S |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Schiebegriffhöhe vom Boden | 78 - 100 cm | 69 - 88 cm | 65 - 77 cm |
| Gesamtlänge | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Gesamtbreite | 60 cm | 60 cm | 55 cm |
| Breite zwischen den Schiebegriffen | 47 cm | 47 cm | 42 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 55 cm | 48 cm |
| Höhe gefaltet | 80 cm | 76 cm | 69 cm |
| Länge gefaltet | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Breite gefaltet | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Wendekreis | 84 cm | 84 cm | 79 cm |
| Vorder- / Hinterräder | 20 x 3,6 cm | 20 x 3,6 cm | 20 x 3,6 cm |
| Gewicht ohne Korb | 7,1 kg | 7,0 kg | 6,6 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg | 130 kg | 125 kg |
| Maximale Belastbarkeit des Korbes | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Empfohlene Körpergröße des Nutzers | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 125 - 165 cm |



GEMINO 30

SpeedControl

DIE INNOVATION

Möchten Sie einen Leichtgewichts-Rollator, der Ihnen maximale Sicherheit beim Gehen ermöglicht? Dann sollten Sie sich für den Gemini 30 SpeedControl mit dem völlig neuen und innovativen Bremssystem entscheiden! Die Fliehkraftbremsen an den Hinterrädern bremsen bei einer Erhöhung der Gehgeschwindigkeit automatisch mit. Sofern Sie nur langsam gehen oder der Weg ansteigt, ist der Bremswiderstand nicht zu spüren.

- 1** Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Effekt kann die Handgriffhöhe ganz einfach an Sie angepasst werden.
- 2** Die falt-Klick-Technik sorgt dafür, dass der Rollator in zusammengefaltetem Zustand steht und platz sparend transportiert werden kann.
- 3** Die Bremskraft des SpeedControl Systems lässt sich in drei Stufen einstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bremsen erfolgt kein Verschleiß an den Rädern.





Durch die dynamische Bremsfunktion ist ein aktives Bremsen nicht erforderlich: Sie erlangen eine aufrechte Körperhaltung und ein homogeneres Gangbild. Ihre Gehgeschwindigkeit wird gleichmäßig, Sie gehen sicher, entspannt und zugleich enger am Rollator. Ein Wegrollen des Rollators ist ausgeschlossen, was der Sturzprophylaxe dient.



Mit den Geschwistern zum Abenteuerspielplatz gehen? Oder lieber mit den Freunden ein leckeres Eis essen? Der Gemino 30 S SpeedControl bietet Kindern alle Möglichkeiten, die Welt zu entdecken. Und dank des innovativen Bremssystems haben sie dabei immer maximale Sicherheit beim Gehen. So wird das Gehtraining zum reinen Vergnügen!

| ABMESSUNGEN | GEMINO 30 SpeedControl | GEMINO 30 M SpeedControl | GEMINO 30 S SpeedControl |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Schiebegriffhöhe vom Boden | 78 - 100 cm | 69 - 88 cm | 65 - 77 cm |
| Gesamtlänge | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Gesamtbreite | 60 cm | 60 cm | 55 cm |
| Breite zwischen den Schiebegriffen | 47 cm | 47 cm | 42 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 55 cm | 48 cm |
| Höhe gefaltet | 80 cm | 76 cm | 69 cm |
| Länge gefaltet | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Breite gefaltet | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Wendekreis | 84 cm | 84 cm | 79 cm |
| Vorder- / Hinterräder | 20 x 3,6 cm | 20 x 3,6 cm | 20 x 3,6 cm |
| Gewicht ohne Korb | 8,5 kg | 8,4 kg | 8,0 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Maximale Belastbarkeit des Korbes | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Empfohlene Körpergröße des Nutzers | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 125 - 165 cm |



GEMINO 30

walker

DER UNTERSTÜTZENDE

Möchten Sie einen Leichtgewichts-Rollator, der Ihnen beim Gehen im Innenbereich zusätzlichen Halt und Unterstützung bietet? Dann sollten Sie sich für den GEMINO 30 Walker entscheiden. Die individuell anpassbaren Unterarmauflagen geben Ihnen viel Sicherheit und schonen zugleich Ihre Gelenke.

- 1** Die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads sorgen dafür, dass Sie die besonders leichtgängigen Bremsen auch mit wenig Restkraft ganz einfach bedienen können.
- 2** Die Unterarmauflagen können in Höhe und Tiefe individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden und geben Ihnen zusätzlichen Halt.
- 3** Der eloxierte Rahmen bietet den perfekten Schutz gegen Kratzer und lässt Ihren Rollator lange gut aussehen.





Durch die Unterarmauflagen ist der Gemino 30 Walker ideal für das Gehtraining von Patienten, die die Beine noch nicht voll belasten dürfen. Um den Alltag zu erleichtern, gibt es viel praktisches Zubehör. So können Sie z. B. mit dem Tablett Ihre Speisen und Getränke sicher transportieren.



Dank der falt-Klick-Technik rastet der Gemino 30 Walker beim Zusammenfallen sicher ein, steht in zusammengeklapptem Zustand und lässt sich platz sparend verstauen, wenn Sie ihn gerade nicht benötigen.

| ABMESSUNGEN | GEMINO 30 WALKER | GEMINO 30 M WALKER |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Schiebegriffhöhe vom Boden | 98 - 115 cm | 84 - 100 cm |
| Gesamtlänge | 65 cm | 65 cm |
| Gesamtbreite | 61 cm | 61 cm |
| Breite zwischen den Schiebegriffen | 25,5 cm | 25,5 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 55 cm |
| Höhe gefaltet | 97 cm | 89 cm |
| Länge gefaltet | 65 cm | 65 cm |
| Breite gefaltet | 35,5 cm | 35,5 cm |
| Wendekreis | 84 cm | 84 cm |
| Vorder- / Hinterräder | 20 x 3,6 cm | 20 x 3,6 cm |
| Gewicht ohne Korb | 10,6 kg | 10,4 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg | 130 kg |
| Maximale Belastbarkeit des Korbes | 5 kg | 5 kg |
| Empfohlene Körpergröße des Nutzers | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm |



GEMINO 20

DAS BASISMODELL

Wenn Sie einen hochwertigen Rollator suchen, der Ihnen ein ganz ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis bietet, sollten Sie sich für den Gemini 20 entscheiden. Die erstklassigen Materialien sorgen für eine hervorragende Stabilität und machen ihn zum absoluten Leichtgewicht, was Sie bei jedem Schritt spüren werden.

1 Durch die Höhen-Schnellverstellung mit Memory-Effekt kann die Handgriffhöhe ganz einfach auf Sie angepasst werden.

2 Die besonders leichtgängigen Bremsen lassen sich durch die breiten Bremsgriffe mit Antirutsch-Pads selbst mit wenig Restkraft sicher bedienen.

3 Die rundum integrierten Reflektoren gewährleisten, dass man Sie im Scheinwerferlicht von allen Seiten frühzeitig sehen kann.





Es macht Freude, mit dem Gemini 20 unterwegs zu sein, denn er verfügt über alle technischen Details, mit denen der Gemini 30 (Testsieger des Verbrauchermagazins Öko-Test) ausgestattet ist. So können Sie sicher sein, dass Sie einen Rollator in einer ganz ausgezeichneten Qualität erhalten!



Die Kreuzstrebe mit der Doppelverriegelung sorgt für eine hohe Stabilität und viel Komfort: Durch die falt-Klick-Technik rastet der Gemini 20 beim Zusammenfallen elegant ein und steht auch in zusammengeklapptem Zustand. Dank seiner kompakten Form können Sie ihn platz sparend verstauen.

| ABMESSUNGEN | GEMINO 20 | GEMINO 20 M | GEMINO 20 S |
|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Schiebegriffhöhe vom Boden | 78 - 100 cm | 69 - 88 cm | 65 - 77 cm |
| Gesamtlänge | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Gesamtbreite | 60 cm | 60 cm | 55 cm |
| Breite zwischen den Schiebegriffen | 47 cm | 47 cm | 42 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 55 cm | 48 cm |
| Höhe gefaltet | 80 cm | 76 cm | 69 cm |
| Länge gefaltet | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Breite gefaltet | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Wendekreis | 84 cm | 84 cm | 79 cm |
| Vorder- / Hinterräder | 20 x 3,6 cm | 20 x 3,6 cm | 20 x 3,6 cm |
| Gewicht ohne Korb | 7,1 kg | 7,0 kg | 6,6 kg |
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg | 130 kg | 125 kg |
| Maximale Belastbarkeit des Korbes | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Empfohlene Körpergröße des Nutzers | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 125 - 165 cm |

FARBVIELFALT



Titanium



Champagne

Midnight
Blue

Black



Bronze



Pink

| | GEMINO 60 | | GEMINO 30 | | | GEMINO 30 SpeedControl | | | GEMINO 30 Walker | | GEMINO 20 | | |
|----------------------|-----------|------|-----------|------|------|---------------------------|------|------|---------------------|------|-----------|------|------|
| | 60 | 60 M | 30 | 30 M | 30 S | 30 | 30 M | 30 S | 30 | 30 M | 20 | 20 M | 20 S |
| Titanium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Champagne | | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| Midnight Blue | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Black | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Bronze | | | ✓ | | | | | | | | | | |
| Pink | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | |
| Silbergrau, lackiert | | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

PRAKTISCHES ZUBEHÖR



Regenschirm mit Halterung höhenverstellbar, sorgt für Sicherheit, da Sie sich mit beiden Händen am Rollator festhalten können.

UVP 99,00 EUR



Tablett praktische Ablage, mit der Sie z. B. Getränke sicher transportieren können.

UVP 45,00 EUR



Rückengurt gibt Ihnen bei einer kurzen Pause Halt und Unterstützung.

UVP 70,00 EUR



Korb mit Halterung für sicheren Transport von tragbaren Sauerstoffflaschen

UVP 89,00 EUR



Schleppbremse

UVP 83,00 EUR



Universalhalterung für diverses Zubehör.

UVP 19,00 EUR



SpeedControl System Fliehkraftbremsen zur Nachrüstung an den Gemino 30 und Gemino 30 Walker

UVP 599,00 EUR



Infusionshalterung

UVP 99,00 EUR



Stock- und Gehstützenhalter sichere Aufbewahrung für unterwegs.

UVP 30,00 EUR



Citytasche mit Tragegriffen und Schultergurt, in Schwarz erhältlich.


UVP 89,00 EUR



Licht gibt Ihnen bei Dunkelheit zusätzliche Sicherheit.

UVP 59,00 EUR

TECHNISCHE DATEN UND MODELLE IM VERGLEICH

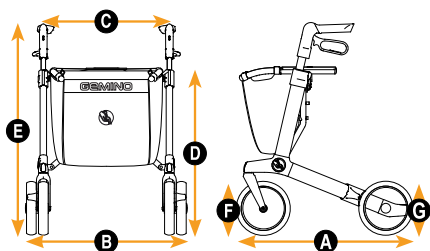

| MODELL | GEMINO 60 | | GEMINO 30 | | |
|---|--|---------------|--|---------------|---------------|
| | 60 | 60 M | 30 | 30 M | 30 S |
| Einsatzbereich | Im Außenbereich bei anspruchsvollem Untergrund (z. B. Kopfsteinpflaster, Waldwege), im Innenbereich bei Schwellen in der Wohnung. Ideal für eine aktive Nutzung / schwergewichtige Personen. | | Im Innen- und Außenbereich, vor allem in der Stadt und auf normalem Untergrund. Optimal für den täglichen Gebrauch. | | |
| Besonderheiten | Außerordentlich hohe Standfestigkeit, besonders große und weiche Räder, extra breiter Sitz, äußerst belastbarer Korb. | | Testsieger des Verbrauchermagazins Öko-Test. Äußerst beweglich durch kleinen Wendekreis. In vielen Lieblingsfarben erhältlich. | | |
| Empfohlene Körpergröße des Nutzers | 150 - 200 cm | 135-170 cm | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 125 - 165 cm |
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 125 kg |
| Maximale Belastbarkeit des Korbes | 10 kg | 10 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Gewicht ohne Korb | 8,5 kg | 8,2 kg | 7,1 kg | 7,0 kg | 6,6 kg |
| Gesamtlänge A | 74 cm | 74 cm | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Gesamtbreite B | 64 cm | 64 cm | 60 cm | 60 cm | 55 cm |
| Breite zwischen den Schiebegriffen C | 51 cm | 51 cm | 47 cm | 47 cm | 42 cm |
| Sitzhöhe D | 62 cm | 53 cm | 62 cm | 55 cm | 48 cm |
| Schiebegriffhöhe vom Boden E | 76 - 95 cm | 73 - 83 cm | 78 - 100 cm | 69 - 88 cm | 65 - 77 cm |
| Höhe gefaltet | 84 cm | 80 cm | 80 cm | 76 cm | 69 cm |
| Länge gefaltet | 74 cm | 74 cm | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| Breite gefaltet | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Vorderräder F | 28 x 4,2 cm | | 20 x 3,6 cm | | |
| Hinterräder G | 23 x 4,2 cm | | 20 x 3,6 cm | | |
| Wendekreis | 95 cm | 95 cm | 84 cm | 84 cm | 79 cm |
| Auch ideal für die Kinderversorgung | | | | | ✓ |
| HMV-Nummer | 10.50.04.1195 | 10.50.04.1196 | 10.50.04.1156 | 10.50.04.1177 | 10.50.04.1178 |



| GEMINO 30 SpeedControl | | | GEMINO 30 Walker | | GEMINO 20 | | |
|---|--------------|--------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| 30 | 30 M | 30 S | 30 | 30 M | 20 | 20 M | 20 S |
| Im Innen- und Außenbereich, für maximale Sicherheit beim Gehen. Sorgt für eine aufrechte Körperhaltung und ein homogeneres Gangbild. Optimal für die Sturzprophylaxe, da der Rollator nicht wegrollen kann. | | | Im Innenbereich. Für Nutzer, die zusätzlichen Halt und Unterstützung benötigen. Ideal für das tägliche Gehtraining. | | Im Innen- und Außenbereich, vor allem in der Stadt und auf normalem Untergrund. Optimal für den täglichen Gebrauch. | | |
| SpeedControl System bremst bei Beschleunigung des Geh tempos automatisch mit. Bremskraft ist in drei Stufen einstellbar. Durch die Fliehkraftbremsen erfolgt kein Verschleiß an den Rädern. | | | Tiefen- und höhenverstellbare Unterarmauflagen schonen die Gelenke. | | Basismodell mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Verfügt über alle technischen Details des Gemino 30. | | |
| 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 125 - 165 cm | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 150 - 200 cm | 135 - 170 cm | 125 - 165 cm |
| 100 kg | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 130 kg | 125 kg |
| 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| 8,5 kg | 8,4 kg | 8,0 kg | 10,6 kg | 10,4 kg | 7,1 kg | 7,0 kg | 6,6 kg |
| 65 cm | 65 cm | 68 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| 60 cm | 60 cm | 55 cm | 61 cm | 61 cm | 60 cm | 60 cm | 55 cm |
| 47 cm | 47 cm | 42 cm | 25,5 cm | 25,5 cm | 47 cm | 47 cm | 42 cm |
| 62 cm | 55 cm | 48 cm | 62 cm | 55 cm | 62 cm | 55 cm | 48 cm |
| 78 - 100 cm | 69 - 88 cm | 65 - 77 cm | 98 - 115 cm | 84 - 100 cm | 78 - 100 cm | 69 - 88 cm | 65 - 77 cm |
| 80 cm | 76 cm | 69 cm | 97 cm | 89 cm | 80 cm | 76 cm | 69 cm |
| 65 cm | 65 cm | 68 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 65 cm | 68 cm |
| 23 cm | 23 cm | 23 cm | 35,5 cm | 35,5 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| | 20 x 3,6 cm | | | 20 x 3,6 cm | | 20 x 3,6 cm | |
| | 20 x 3,6 cm | | | 20 x 3,6 cm | | 20 x 3,6 cm | |
| 84 cm | 84 cm | 79 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 79 cm |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| beantragt | | | 10.50.04.1182 | 10.50.04.1183 | 10.50.04.1179 | 10.50.04.1180 | 10.50.04.1181 |

Mehr über Handicare

Seit über 25 Jahren arbeiten wir mit großer Leidenschaft daran, das tägliche Leben für Senioren, behinderte Menschen und deren Pflegekräfte leichter zu machen. Alles begann 1986, als Tom Myklebust und zwei weitere Rollstuhlfahrer, alle akut querschnittsgelähmt, sich zufällig in einem norwegischen Rehabilitationszentrum getroffen haben. Sie haben zusammen die Firma „Rullestolekspertene“ (Rollstuhl-experten) gegründet, um hochwertige, maßgeschneiderte Rollstühle zu entwickeln. Sie wollten damit die Freiheit und Lebensqualität der Menschen erhöhen – und die Produkte sollten sich deutlich von allen anderen Produkten unterscheiden. Heute ist Handicare, wie sich das Unternehmen seit 1995 nennt, einer der führenden Hilfsmittelanbieter in Europa. Tom Myklebust ist für uns eine große Bereicherung und ein Vorbild, denn er zeigt uns täglich, wofür Handicare steht: Den Menschen den Alltag leichter zu machen, indem wir ihre Bedürfnisse herausfinden und ihnen ein großes Sortiment an hochwertigen Produkten anbieten, wie z. B. Rollstühle, Scooter, Rollatoren, Transferhilfen, Treppenlifte sowie Produkte für Bad, Dusche und WC. Wieso wir das tun? Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder Tag im Leben zählt.

“Ich glaube, den Alltag zu erleichtern, macht wirklich einen Unterschied im Leben der Menschen. Diese Leidenschaft mit so vielen begeisterten und engagierten Mitarbeitern bei Handicare zu teilen, bereitet mir große Freude.”

Tom Myklebust





Stand 09/2014. © 2014 Handicare GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

GEMINO



handicare

www.handicare.de